

Gamme Sample Box®

Emballages combinés type 4G pour le transport de produits sanguins.

CARTOSPE
PACKAGING



Recyclable



Matière infectieuse



Homologués UN 6.2

La gamme Sample Box® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'un ensemble combiné d'une caisse carton doublée d'une sache en polyéthylène Haute Densité avec un lien coulissant. Ces emballages sont utilisés dans les laboratoires pour le transport de produits sanguins et réutilisable en emballages DASRI. Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.

Gamme Sample Box®

Emballages combinés type 4G pour le transport de produits sanguins.

CARTOSPE
PACKAGING



Recyclable



Matière infectieuse



Homologués UN 6.2

Boîtes intérieures

Quatres éléments composent la boîte :

- Fond
- Couvercle
- Plaque à trous supérieure de maintien (96 trous)
- Plaque à trous inférieure de stabilisation (96 trous)

Cette boîte est utilisée dès la collecte issue des dons du sang jusqu'à son élimination finale en filière spécialisée DASRI.

Ces emballages sont utilisés dans les différents établissements de santé (hôpitaux, cliniques, centres de santé, laboratoires...).

Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900.


AVANTAGES

- Regroupement de plusieurs tubes
- Montage rapide
- Emballages boîtes de réception tubes 5 ml et 7ml
- Stabilité des tubes
- Usage unique
- Deux positions possibles de plaques à trous supérieure
- Faible coût d'utilisation
- Stockage à plat, gain de place


Boîtes intérieures

Référence	Fond	Couvercle	Plaque a trous Sup.	Plaque a trous Inf.
Dimensions intérieures (mm)	220 x 170 x 108	227 x 179 x 29	292x266 à plat	234x178 à plat
Capacité utile	-	-	96 Tubes	96 Tubes
Poids de l'emballage	77 g	32 g	25 g	15 g
Epaisseur carton	Simple cannelure Type E 1.2mm Blanc 2 faces		Carton Plat Blanc 2 Faces 1mm	
Architecture	Fefco 422	Fefco 422	Plaque à trous (Diam 13mm)	
Fermeture	Encliquetage	Encliquetage	-	-
Nombre par palette	3000	3000	9000	9000
Dimensions palette (LxH/cm)	100 x 120 x 180	80 x 120 x 90	80 x 120 x 170	80 x 120 x 170
Poids palette	235 Kg	100 Kg	230 Kg	135 Kg
Protection palette	Renfort carton cerclage + film étirable			


Composition

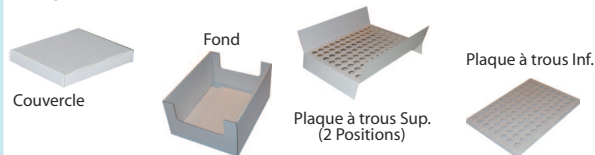

Position Haute

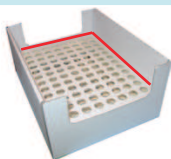

Position Basse

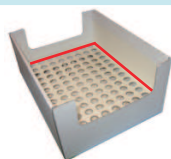

Contact

CARTOSPE Packaging
13, voie industrielle
60350 ATTICHY

Tél. : (+33) 03.44.42.73.99

Fax : (+33) 03.44.42.73.98

email : cartospe@cartospe.fr

web : www.cartospe.fr

I Gamme Sample Box®

Emballages combinés type 4G pour le transport de produits sanguins.

CARTOSPE
PACKAGING



Recyclable



Matière infectieuse



Homologués UN 6.2

Emballages carton pour le transport de produits sanguins.

La gamme Sample Box® a été conçue dans le respect de toutes les réglementations en vigueur. Il s'agit d'un ensemble combiné d'une caisse carton doublée d'une poche en polyéthylène Haute Densité avec un lien coulissant.

Ces emballages sont utilisés dans les laboratoires pour le transport de produits sanguins et réutilisable en emballages DASRI. Attention, ils ne doivent pas contenir de matières répondant aux codes UN 2814 et 2900

AVANTAGES

- Lien coulissant de fermeture,
- Marquage conforme Arrêté du 24/11/2003 modifié le 06/01/2006, NFX 30-507
- Poignées solides avec une manipulation sans contact possible avec les tubes ou les échantillons sanguins.
- Sèche juppable
- Système de fermeture provisoire et définitive
- Visuel de fermeture définitive tel que le prévoit la norme NFX 30-507.
- Palettisation avec un côté 80 cm pour permettre une manutention facilitée.
- Faible coût d'utilisation
- Stockage à plat, gain de place

Gamme Sample Box®

Référence	Sample Box® PM	Sample Box® GM
Dimensions intérieures (mm)	275 x 275 x 304	420 x 315 x 398
Volume réel	23L	53L
Volume utile	21.85L	50.35L
Poids de l'emballage	438 g	750 g
Épaisseur carton	cannelure B 2,8 mm en carton recyclé	cannelure EB 4.3 mm en carton recyclé
Architecture	fond automatique pour un montage simple et rapide	
Fermeture	provisoire et définitive simple, intuitive et efficace	
Épaisseur poche	PEHD 40µ de couleur jaune	PEHD 73µ de couleur jaune
Traitement	corona pour un collage efficace	
Fermeture	Lien coulissant	
Homologation ADR	4G/Y12/S/année/F/BVT 172741/cartospé	4G/Y15/S/année/F/BVT 172737/cartospé
Homologation Arrêté du 24/11/2003	Oui	
Conformité à la Norme NFX 30-507	Oui	Non
Masse brute maximale admissible	12 Kg	15 Kg
Marquage	Conforme à la réglementation ADR, Arrêté du 24/11/2003, modifié le 06/01/2006 et à la norme NFX 30-507	
Conditionnement	par paquets de 10 unités sur palette	par paquets de 5 ou 10 unités sur palette
Nombre par palette	200	125
Dimensions palette (LxbH/cm)	80 x 100 x 180	80 x 100 x 165
Poids palette	90 Kg	100 Kg
Protection palette	Renfort carton cerclage + film étirable	

Fermeture

Faire un premier noeud
Plier en col de cygne
Faire un second noeud

Exercer une pression et rabattre les côtés

Coller l'étiquette de collecte

Coller l'étiquette d'identification

Fermeture provisoire

Fermeture définitive

Mise en forme

Après avoir introduit la main dans l'emballage, exercer une pression sur les côtés de la caisse pour mise en forme.

Plier et rabattre les poignées

Rabattre les côtés vers l'extérieur

Jupper la poche

Contact

CARTOSPE Packaging
13, voie industrielle
60350 ATTICHY

Tél. : (+33) 03.44.42.73.99

Fax : (+33) 03.44.42.73.98

email : cartospe@cartospe.fr

web : www.cartospe.fr